

**Toksikolojik,
Narkotik,
Uyuřturucu, Uyarıcı
ve Yasaklı Madde
Testleri**



NarkoTest Uyuşturucu Madde Tarama Testleri

- Güvenli
- Duyarlı
- Hızlı
- Geniş Test Menüsü
- Ön işlemlsiz
- Manual veya Cihazla Çalışma Opsiyonu
- GC-MS ile %99 oranında uyumlu.



Acetaminophen(ACE)

Amphetamine(AMP)

Barbiturates(BAR)

Benzodiazepines(BZO)

Buprenorphine(BUP)

Cocaine(COC)

Marijuana(THC)

Methadone(MTD)

Methamphetamine(MET)

Methylenedioxymethamphetamine

Morphine(MOP/OPI)

Methaqualone(MQL)

Opiate(OPI)

Phencyclidine(PCP)

Propoxyphene(PPX)

TricyclicAntidepressants(TCA)

Tramadol(TML)

Ketamine(KET)

Oxycodone(OXY)

Cotinine(COT)

2-ethylidene-1,5-dimethyl-(EDDP)

Fentanyl(FYL)

SyntheticMarijuana(K2)

6-mono-aceto-morphine(6-MAM)

(±)3,4-Methylenedioxy-
Amphetamine(MDA)

Clonazepam(CLO)

LysergicAcidDiethylamide(LSD)

Methylphenidate(MPD)

Zolpidem(ZOL)

Diazepam(DIA)

3,4-methylenedioxypropylone(MDPV)

Carfentanyl(CFYL)

7-Aminoclonazepam(7-ACL)

alpha-Pyrrolidinovalerophenone(α -PVP)

Cathinone(CAT)

Alcohol(ALC)

Ethyl- β -D-Glucuronide(ETG)

Geniş Test Menüsü

Madde Testleri Nereelerde Kullanılır?

Acil
Servisler

Adli
Vakalar

Okul
Taramaları

İşyeri
Taramaları

Toplu Taşıma
Sürücüleri
Taramaları

Bağımlılık
Tedavileri

Genel
Taramalar

Panel Test Cihazı

- Teknisyenin sübjektivitesini ortadan kaldırır.
- 7" dokunmatik ekran
- Kolay Kullanım
- 5 sn. de Ölçüm
- LIS Bağlantısı
- Barkod Okuyucu
- 3000 Hasta sonucu ve görüntüsü saklama
- Termal Printer



Örnek Cihaz Raporu

- Raparda
 - Kullanılan Testin Kodu
 - Lot Bilgisi
 - Son Kullanma Tarihi
 - Hasta Adı Soyadı
 - Yaşı
 - Cinsiyeti
 - Test Yapılma Tarihi

Gibi önemli bilgiler test sonucu ile beraber dahili yazıcıdan alınır.

TEST REPORT

1) PRODUCT

Ref.: DOA-R1124
Lot: ATDOA22090128E
Exp.: 2024-08

2) PATIENT

ID: 3
Name:
Age: 0
Gender:

3) RESULT

MOP300: Negative
COC300: Negative
OXY100: Negative
MDMA500: Negative
MTD300: Negative
AMP1000: Negative
MET1000: Negative
BZ0300: Negative
BAR300: Negative
TCA1000: Negative
BUP10: Negative
THC50: Negative

Tested: 2022-12-07 13:26:03
Printed: 2022-12-07 13:26:04


İdrar Bardak Testleri

- Kliniklerde, Evde, işyerinde, Okulda vs ihtiyaç duyulan her yerde kullanım için tasarlanmıştır.
- 14 Parametreye kadar istenilen kombinasyon
- Entegre İdrar bütünlük test seçeneği
- İdrar doğrudan bardağa alınır.
- 5dk. Sonra sonuçlar bardak üzerinden okunur.
- 24 Ay Raf Ömrü



Tükrük Panel Testleri

- Denetimlerde, Kliniklerde, Evde, işyerinde, Okulda vs ihtiyaç duyulan her yerde kullanım için tasarlanmıştır.
- 12 Parametreye kadar istenilen kombinasyon
- Aparat 3 dk. Ağızda bekletilir.
- Test kutusuna takılır ve 10 dk sonunda sonuçlar test kutusu üzerinden okunur.
- 24 Ay Raf Ömrü

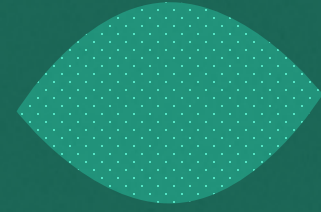

İdrar Bütünlük Test Stripleri

- İdrarın yapısını bozarak sonuçların negatif çıkmasını sağlamak için, idrar numunesine yapılan müdahale olup olmadığını test etmek için tasarlanmıştır.
- İdrarda Kreatinin, Nitrit, Glutaraldehit, pH, Özgül Ağırlık, Oksidanlar ve Piridinyum Klorokromat tespiti için semi-kantitatif tespit sağlar.
- 1 dk. Da sonuç
- İdrar numunesi için Normal veya Abnormal olarak ayırımı sağlar



Sağlık Bakanlığının genelgesi kapsamında Uyuşturucu tarama testleri ile beraber yapılması zorunludur.

Pozitif ve Negatif Kontroller

- Sentetik olarak üretilmiş olan kontroller Uyuşturucu Testlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için tasarlanmıştır.
- Likit, kullanıma hazır.
- Pozitif ve Negatif olarak iki seviye
- Uzun Ömürlü



BAZI MADDELERİN İDRARDA TESPİT ZAMANLARI

Madde	Minimum	Maximum
Amfetamin	2-7 saat	2-4 Gün
Barbitürat	2-4 saat	7-21 Gün
Benzodiazepin	2-7 saat	1-4 Gün
Kokain	1-4 saat	2-4 Gün
Marijuana(THC)	2 saat	15-40 Gün
MDMA	2-7 saat	1-3 Gün
Metamfetamin	2-7 saat	2-4 Gün
Opiat	2 saat	2-3 Gün
Metadon	3-8 saat	1-3 Gün
TCA	8-12 saat	2-7 Gün



NEDEN İDRAR?

- Kan örneklerine göre en önemli avantajları, kullanılan maddenin ve metabolitlerinin yüksek konsantrasyonda bulunmasıdır
- Yapısında serbest serum proteinleri, lipidler ve diğer büyük moleküler ağırlıklı bileşiklerin bulunmaması toksikolojik ön analizleri ve numune hazırlığını kolaylaştırır
- İdrar analizleri üzerine oldukça fazla deneyim vardır

İLETİŞİM

Adres: Turgut Özal Mahallesi
2167 Sk. No:3/B-89
Yenimahalle / ANKARA

Tel & Faks: 0 312 503 2672

E-posta: info@bora-bio.com

web: www.bora-bio.com



bora
biyoteknoloji ltd. şti.

TÜRKİYE YETKİLİ TEK DİSTRİBÜTÖRÜ